

## Abbonamento a un sito Nightscout gestito NS10BE



Nightscout ZehnBe è nato dalla volontà di Martin Schiftan di fornire un servizio senza la difficoltà di costruzione legata al fai-da-te. Originariamente gratuito e basato su donazioni volontarie, il successo del suo lavoro non ha permesso di continuare gratuitamente per il numero troppo alto di utenti. Adesso, il servizio è fornito contro pagamento di un abbonamento mensile di massimo 5€. Questo pagamento permette a Martin di assicurare la manutenzione dei suoi server e l'eccesso di ricavo viene riversato alla comunità del fai da te, principalmente per AAPS.

Utilizzare un sito Nightscout con NS10BE è un'esperienza semplice e affidabile. Nessun aggiornamento (automatico) un database di 2GB (non si riempie) nessuna migrazione...

Per maggiori informazioni su Nightscout vedi qua:

<https://nightscout-github-io.translate.goog/? x tr sl=auto& x tr tl=it>

## 1 – Creare un account

Vai sul sito <https://ns.10be.de/en/index.html>

Clicca **Create an account**

### What is ns.10be.de?

Well, for your own **Nightscout** To set up an instance, some work is already near. So I automated it a bit further. So you can now easily over the **profile** (after a few instances).

In short, it's a **Managed Nightscout Service**. Apart from your settings (with a cli) The rest is done automatically by **10BE** in the background for the user.

The exact process in the background is explained below **Features**

Create an account

or log in

Compila con un nome utente (che devi inventare), indirizzo email e paese di residenza:

**Create an account at ns.10be.de:**

Username  
-

E-Mailaddress  
i@e

Country  
Italy

Conferma che hai ben capito le regole di utilizzazione del servizio prima di selezionare le due caselle. **Non andare avanti se non sei sicuro.**

I accept the **Conditions and Terms and Privacy Policy** (how long we save the reports, storage time).

AND: I am aware that this is an Experimental and NONmedical service that in no way replaces the medical therapy given by my doctor and should not be used for this purpose. Therefore, I exempt the operator, agents, etc. from any responsibility regarding the use of this service.

Yes, I understand that the system is NOT designed for diagnosis or screening.

I am aware that the system is purely information management software (diary/data storage) and is not a substitute for the advice of medical professionals.

If you have any questions about therapy, it is essential to contact the specialist staff!

Accetto le Condizioni e i Termini e l'Informativa sulla Privacy (per quanto tempo salviamo i rapporti, tempo di conservazione).


**E: Sono consapevole che questo è un servizio sperimentale e NON medico che non sostituisce in alcun modo la terapia medica data dal mio medico e non dovrebbe essere utilizzato per questo scopo.** Pertanto, esonero l'operatore, gli agenti, ecc. da qualsiasi responsabilità in merito all'utilizzo di questo servizio.

Sì, capisco che il sistema NON è progettato per la diagnosi o lo screening.

**Sono consapevole che il sistema è puramente un software di gestione delle informazioni (diario / archiviazione dei dati) e non sostituisce la consulenza dei professionisti medici.**

Se hai domande sulla terapia, è essenziale contattare il personale specializzato!

Risolvi i Captcha e vai avanti cliccando **Create an account now for free.**

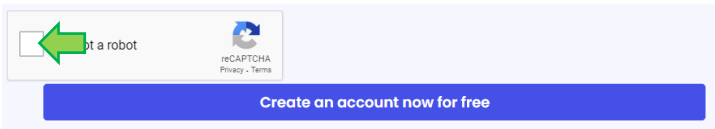

## Register a Account for ww.ns.10be.de

**Thank you for your Registration.**

We have just send a message with a link to the address you specified: \_ @ .

Please confirm the link within 7 days, as otherwise the link will become invalid. (During the period no further registration with the registered data are possible only after the end of the period, confirmation or rejection of registration).

Under </en/register.resend.html>, the registration mail can be sent again in a few minutes if the mail has not arrived.

Best Regards  
your ns.10be.de-Team

Vai nella tua posta per vedere la mail di verifica, se non la trovi guarda nella cartella spam.  
Clicca il link per confermare la tua mail.

Link confirmation of registration for the account on ns.10be.de Posta in arrivo x

ns.10be.de <system-support@ns.10be.de> 19:25 (2 minuti fa) ☆ ↶ ⋮  
a me ▾

🌐 inglese ▾ > italiano ▾ Traduci messaggio Disattiva per: inglese x

Hello glicemiadistanza

thank you for your registration on <https://ns.10be.de/>

So that the registry is finally completed is a confirmation of the holder of the given e-mail address ( ) is necessary.

If you want to confirm the registration, please click on the link below:  
<https://ns.10be.de/en/register.confirm.html?regkey=50062932-1008525914>

~~If you have not registered with us, so you ignore the e-mail, because all unconfirmed registrations expire automatically after 7 days.  
You can lock your address for other entries by permanently following link:  
<https://ns.10be.de/en/register.disable.html?regkey=50062932-1008525914>~~

Ecco sei registrato.

## Registration Step 2 from 2


**Thank you to confirm your Registration.**

Registration is now complete.


You will receive an additional e-mail from us with your account data. These, and any other information you can always edit your profile.

Best Regards  
your ns.10be.de-Team


Controlla la tua email, ci troverai la tua **password** di primo accesso.

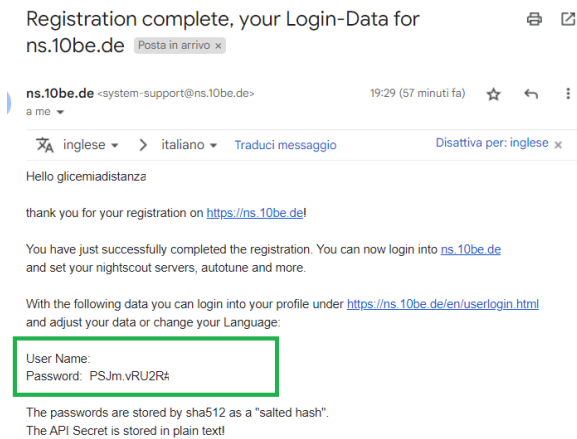

Adesso puoi fare il **login** (in alto a destra) usando le credenziali della mail.

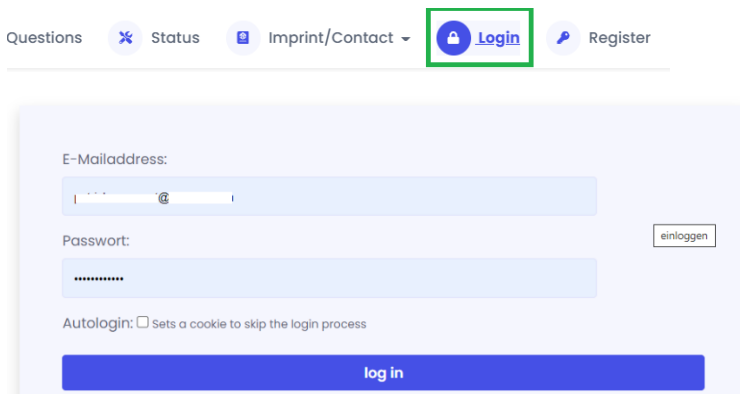


Una volta nella tua home page, vai in Server e fai **+Create Server**

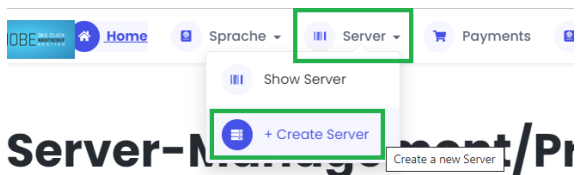

**Use of the services at your own risk!!!**

Accetta il trattamento dei dati (GDPR) e conferma di avere capito a cosa serve questo servizio.

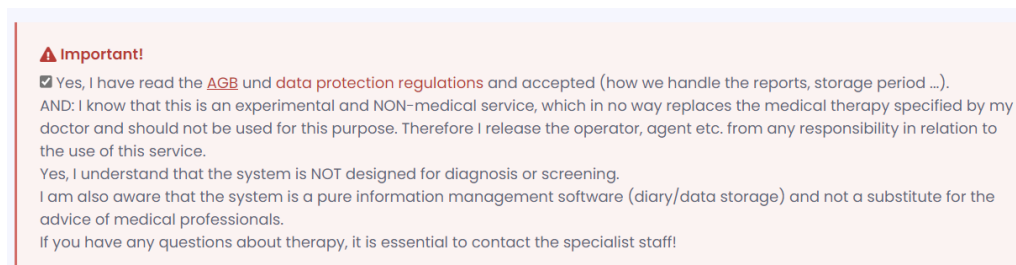

## Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

Inserisci il nome del tuo sito in **Name**, se è già preso scegline un altro (sole minuscole, numeri e -).

Se vuoi personalizzare la pagina di Nightscout metti un nome in **Display-Name**.

Crea una password per il tuo sito (si chiama API Secret) in **API-Password**, deve essere di almeno 12 caratteri. Meglio usare solo lettere e numeri (non usare !#%&/=).

**Name:**  
Is used for the public nightscout URL (xxxxname.ns.10be.de)  
Numbers, letters and - only!  
.ns.10be.de

**Display-Name:**  
can remain empty

**API-Password:**  
The password can be chosen freely (at least 12 characters long)  
(but stored in plain text in the database).  
Special characters like !#%&/= Have to be escaped in xDrip.

Se usi Spike o Loop, abilita **Without port**.


**Without-Port:**  
If activated, the server is also ONLY accessible with https:// WITHOUT the Port. Iphone loop user, have to activate this, because loop ignores the port!  
 Activate to call up the page directly via https://xxx.ns.10be.de/

Metti il display su 24 ore se vuoi, cambia le soglie di allarme, e la lingua.

Modifica soltanto quello che sai che ti serve.


**Serverlocation:**  
If activated, it will use cluster and MongoDB server from Location Germany.  
 Serverlocation Germany

**Branch:**

**12/24h Hours:**  
 24h  12h 

**Alert for High:**  activate  
BG\_HIGH:   
BG\_TARGET\_TOP:

**Alert for Low:**  activate  
BG\_LOW:   
BG\_TARGET\_BOTTOM:

**Language:**  

Se vuoi usare la glicemia direttamente dai server Dexcom Share completa la parte sotto:

Login e password sono quelli che usi per l'app master collegata al sensore. Lascia **EU** per il server.

▼ **Dexcom Share (ONLY Dexcom)**

**Dexcom bridge\_user\_name** [More Infos](#)

**Dexcom bridge\_password** [More Infos](#)

**will be saved in plain text!**

**Dexcom bridge\_server** [More Infos](#)

## Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

Se usi un Libre 3 con LibreView, puoi recuperare la glicemia direttamente dal server. Usa le credenziali di un follower LibreLink Up (non quelle per entrare in LibreView). Metti il server corrispondente al tuo paese o **EU**.

▼ LibreLinkUP (LibreLinkUP-Follower, fsI3)

LibreLinkUP (Follower) librelink\_user\_name More Infos

LibreLinkUP (Follower) librelink\_password More Infos

**will be saved in plain text!**

LibreView librelink\_server More Infos  
 LibreView librelink\_interval (1 Min default) Weitere Infos

Every 5 minutes instead of every minute?

Scorri giù e fai **Save server**

Il tuo server è pronto alla creazione. Puoi già vedere il suo indirizzo.

**ID: 10622** Port: 14580 Cluster: 36  
**Name: glicemiadistanza-it**  
MongoDB: 8 DB-Port: 9920  
DB-Size: 0 Bytes

**STATUS:** creating  
**IMPORTANT!**  
There is no payment for this Server. Please pay first under [Payments \(new tab\)](#).

**Server-URL:**  
<https://glicemiadistanza-it.ns.10be.de:14580/>

**API-Password (Api-Secret):**  
MiaPasswordSuperSecreta

Puoi anche vedere quale sarà l'URL da inserire in xDrip+ master e per i diversi master/follower.

▼ xDrip Basis URL: ▼

<https://MiaPasswordSuperSecreta@glicemiadistanza-it.ns.10be.de:14580/api/v1/>

▼ AndroidAPS/iphone Loop: ▼

<https://glicemiadistanza-it.ns.10be.de/>

Pero adesso devi inserire un modo di pagamento. Segui questo link:

**STATUS:** creating  
**IMPORTANT!**  
There is no payment for this Server. Please pay first unde [Payments \(new tab\)](#).

Scegli la durata, più mesi, minore il costo. Se vuoi provare, prendi solo un mese. Verifica che il server per il quale vuoi pagare sia quello che hai appena creato.

### Pay 1 managed Nightscout Instance

**Duration:**

- 4,99 Euro for 1 Month
- 13,99 Euro for 3 Months
- 25,99 Euro for 6 Months
- 49,99 Euro for 12 Months \*


Or:


- 14,99 Euro for 1 **DB Export** (no subscription possible)

**Server:**  
If "empty" the payment is assigned to a server during the action (start, redeploy, create...).

Se scegli una sottoscrizione, l'addebito verrà automaticamente rinnovato ogni scadenza.


**With Subscription** with automatic payment and extension from the selected term:


**stripe.com:** (Creditcard) 


**PayPal:** (Paypal, Creditcard, SEPA, Transfer...) 

Se scegli senza sottoscrizione, dovrai ricordarti (riceverai una mail) di pagare per andare avanti dopo la scadenza.


**Without Subscription**, always has to be paid manually here:

**stripe.com:** (Creditcard, SEPA, Google Pay, Transfer...) 

**PayPal:** (Creditcard, SEPA, PayPal...) 

Powered by 

Adesso puoi aprire il tuo nuovo sito Nightscout, dal menu vai in Server e scegli il tuo.

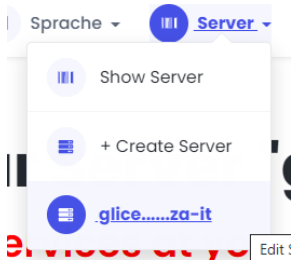

Seleziona il link del tuo sito.

## Edit your Server "glicemiadis"

Use of the services at your own risk!!!

[Back to the Server overview](#)


[Delete your Server "glicemiadistanza-it".](#)

Edit your Server "glicemiadistanza-it".


Server-URL: <https://glicemiadistanza-it.10be.de:14580>



Una volta il tuo sito Nightscout aperto, clicca sul menu and seleziona Profile Editor.

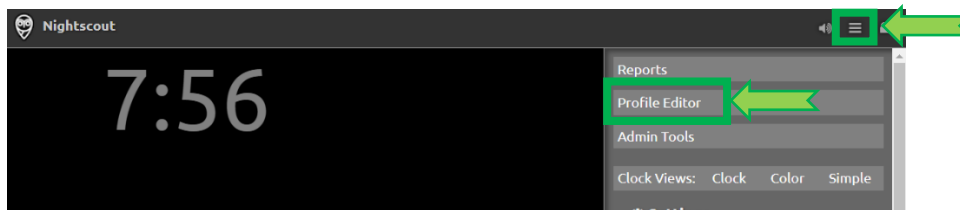


Imposta il fuso orario Time zone ed altri campi se vuoi.

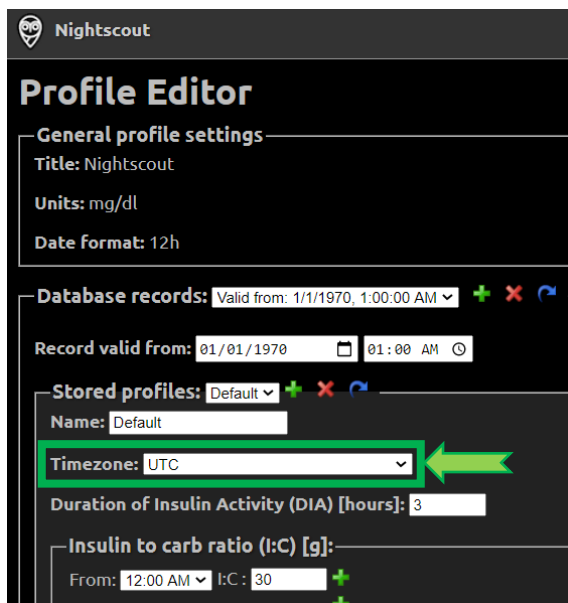

Italia: Europe/Rome

## [Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)


Vai in fondo a Authentication status e clicca **Authenticate**. Digita la API secret. Clicca **Update**.  
Clicca **Save**.

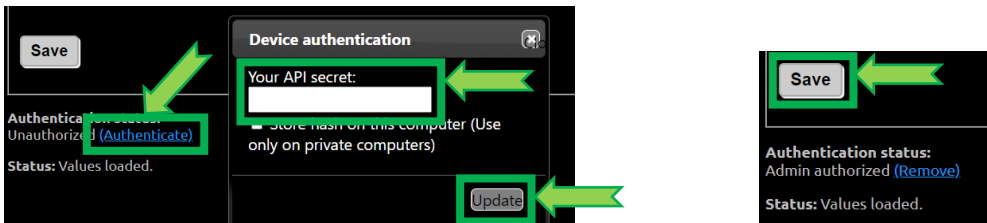


Se la scritta sotto compare clicca OK, verifica lo stato in alto a destra.

mynewcgm.herokuapp.com says

Profile is going to be saved in newer format used in Nightscout 0.9.0 and above and will not be usable in older versions anymore. Are you sure?

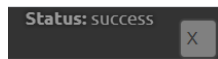

Se usi Dexcom Share dovresti vedere dati entro qualche minuto, per xDrip+, Spike, xDrip4iOS, etc. devi impostare l'indirizzo Nightscout e l'API secret nell'app.

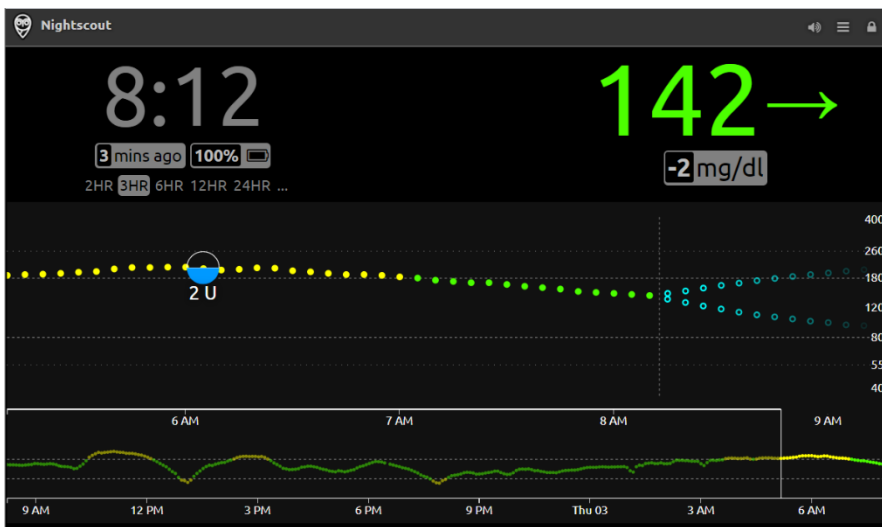

Benvenuto in CGM in the cloud, la glicemia nel cloud!

## ***Contatti***



[Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)



[glicemiadistanza@gmail.com](mailto:glicemiadistanza@gmail.com)