

Nightscout aggiornamento con Heroku




Adattato dalla guida ufficiale:

<https://nightscout-github-io.translate.goog/update/update/? x tr sl=auto& x tr tl=it>

Usare solo per aggiornare un sito Nightscout con **Heroku (non con Azure)**.

Per vedere la versione corrente di Nightscout vai qua:

<https://github.com/nightscout/cgm-remote-monitor/releases>

Per vedere la tua versione, clicca sul menu  in alto a destra della tua pagina Nightscout e scorri in basso.



Se non hai l'ultima versione è consigliato aggiornare.


Accedi a Heroku e GitHub da un computer.

Non cambiare dispositivo/computer/browser durante l'aggiornamento!


Note: Se incontri problemi con Chrome prova con Edge.

GitHub


Clicca questo link per loggarti in GitHub: <https://github.com/>
Clicca su Sign in

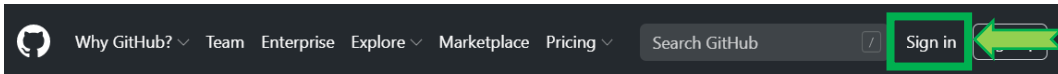


Digita il tuo nome GitHub o la tua mail e la tua password.

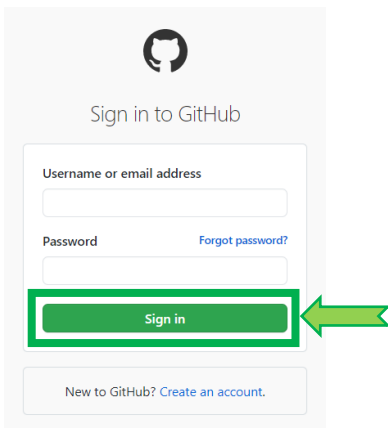


Seleziona il tuo progetto cgm-remote-monitor.

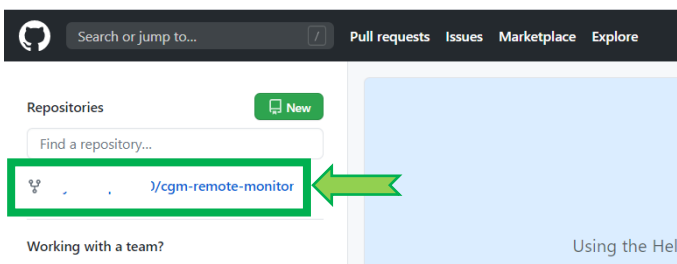


Seleziona il tuo progetto cgm-remote-monitor. Guarda sotto master se non è scritto **This branch is ... commit behind nightscout:master**. Se sì, clicca **Fetch upstream**.

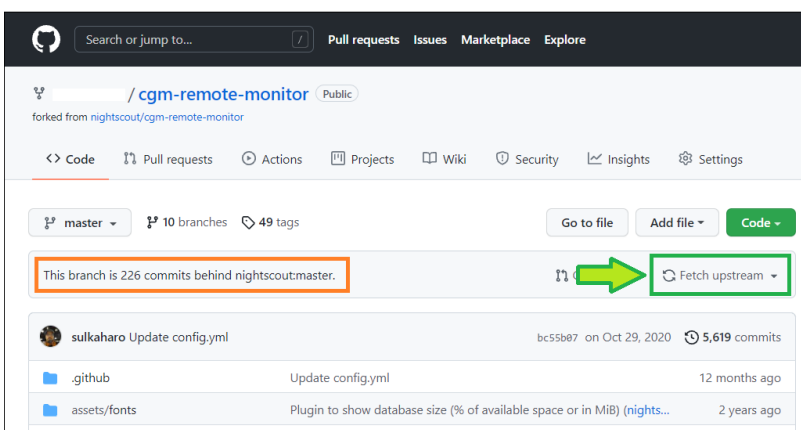

Clicca **Fetch and merge**.

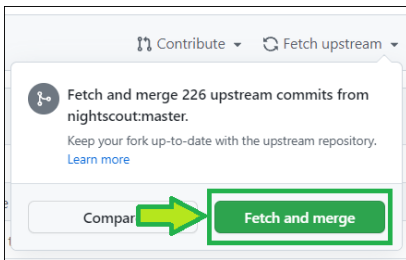


Dopo pochi istanti comparirà **This branch is up to date with nightscout:master**.

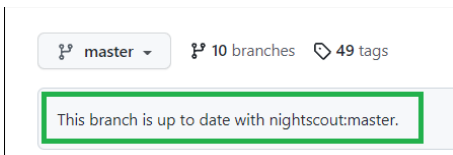

Hai aggiornato GitHub, puoi proseguire con [Heroku](#) al paragrafo successivo (non chiudere GitHub).

Se invece hai avuto difficoltà, prova il metodo di redeploy sotto:
Seleziona **Settings**.

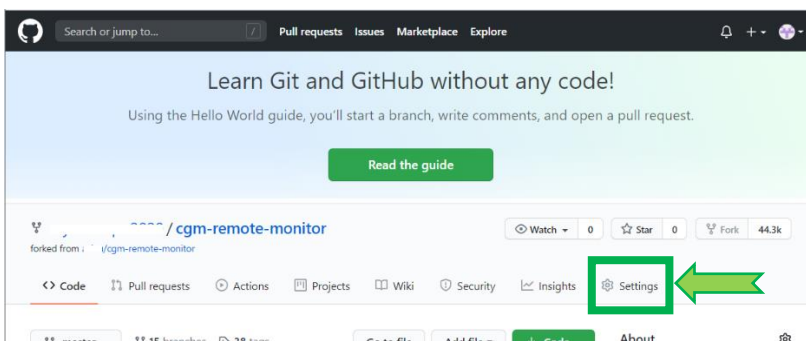

Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

Scorri giù a Danger Zone e clicca Delete this repository.

Danger Zone

Change repository visibility You cannot change the visibility of a fork. Please duplicate the repository .	Change visibility
Transfer ownership Transfer this repository to another user or to an organization where you have the ability to create repositories.	Transfer
Archive this repository Mark this repository as archived and read-only.	Archive this repository
Delete this repository Once you delete a repository, there is no going back. Please be certain.	Delete this repository

Copia incolla il nome completo del tuo progetto per confermare, clicca I understand...

Are you absolutely sure?

Unexpected bad things will happen if you don't read this!

This action **cannot** be undone. This will permanently delete the `nightscout/cgm-remote-monitor` repository, wiki, issues, comments, packages, secrets, workflow runs, and remove all collaborator associations.

Please type `nightscout/cgm-remote-monitor` to confirm.

I understand the consequences, delete this repository

Clicca questo link per andare nel progetto ufficiale:

<https://github.com/nightscout/cgm-remote-monitor>

Quindi clicca su Fork

Search or jump to... Pull requests Issues Marketplace Explore

Learn Git and GitHub without any code!

Using the Hello World guide, you'll start a branch, write comments, and open a pull request.

Read the guide

nightscout / cgm-remote-monitor

Watch 248 Star 1.3k Fork

Code Issues 162 Pull requests 26 Actions Projects Wiki Security Insights

Aspetta che finisca, lascia GitHub aperto.

Forking nightscout/cgm-remote-monitor

It should only take a few seconds.



Search or jump to... Pull requests Issues Marketplace Explore

Learn Git and GitHub without any code!

Using the Hello World guide, you'll start a branch, write comments, and open a pull request.

Read the guide

nightscout / cgm-remote-monitor

Watch 0 Star 0 Fork 44.3k

Code Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

master 23 branches 42 tags

Go to file Add file Code

This branch is even with nightscout/master.

Pull request Compare

About nightscout web monitor


Readme

Heroku


Non chiudere GitHub, apri un altro tab nel tuo browser.

Clicca questo link per loggarti in Heroku: <https://id.heroku.com/login>


Digita mail e password, clicca Log In

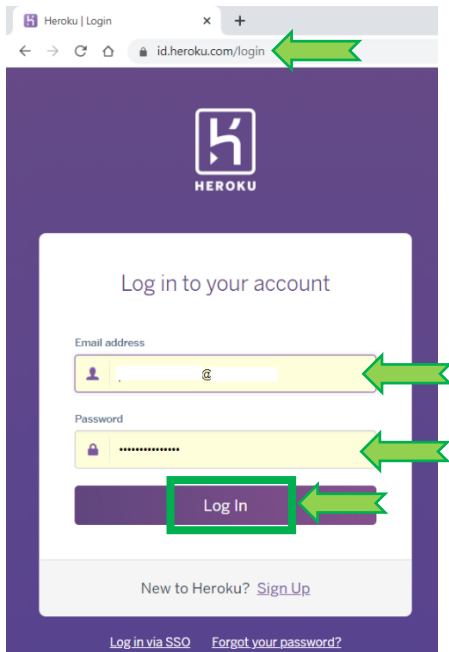

Seleziona la tua app Nightscout

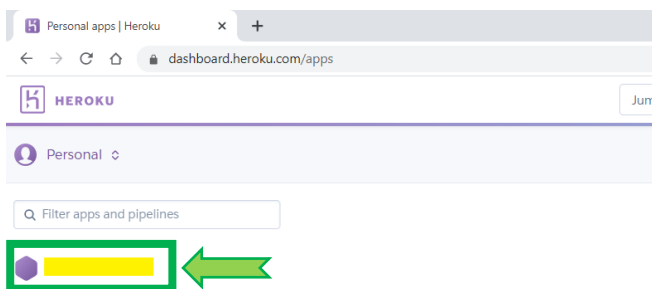


Vai in Deploy

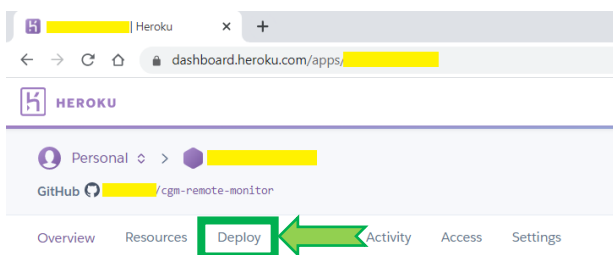


Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie


Clicca su GitHub

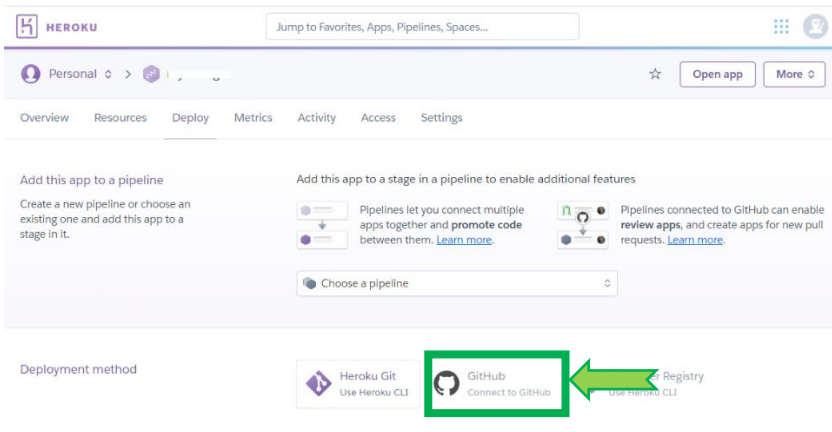


Se non sei collegato a GitHub clicca Connect, autorizza Heroku e digita la tua password

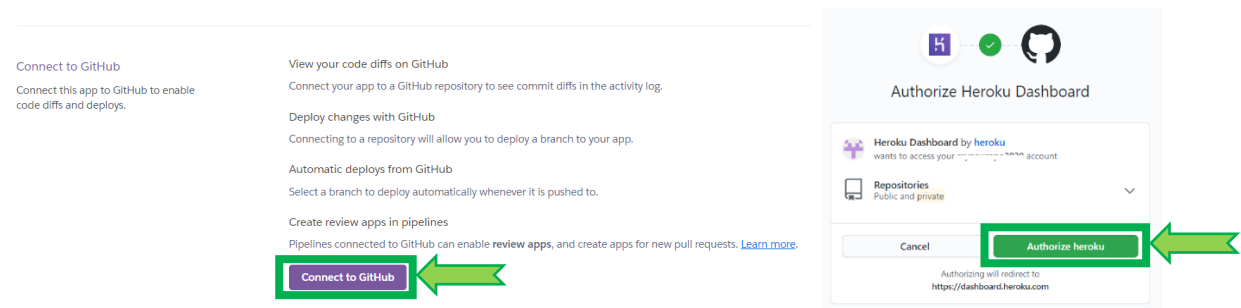


Verifica che la tua app cgm-remote-monitor sia collegata a Github

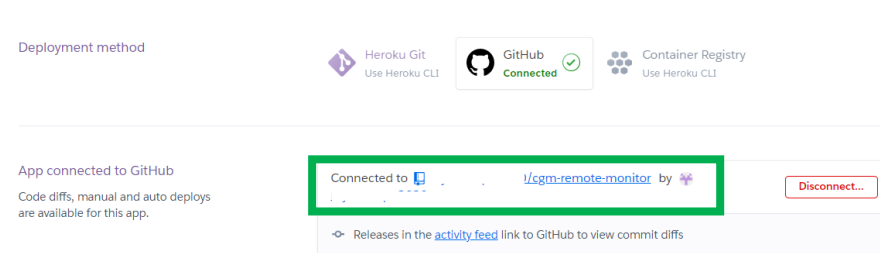

Se non lo è, digita cgm-remote-monitor e clicca Search, clicca Connect

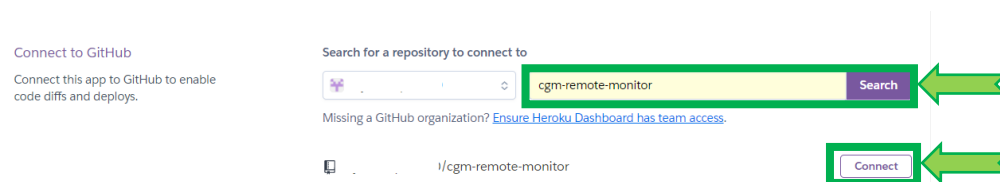

Se incontri difficoltà a collegarti a GitHub, clicca Disconnect e torna all'inizio di questa pagina

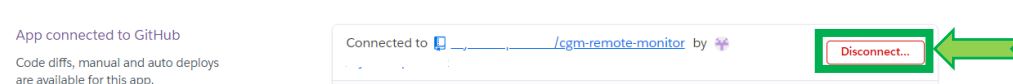

Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

Scorri giù a Manual deploy, seleziona il ramo master e clicca Deploy Branch

Manual deploy

Deploy the current state of a branch to this app.

Deploy a GitHub branch

This will deploy the current state of the branch you specify below. [Learn more.](#)

Choose a branch to deploy

▼ master

Deploy Branch



Build si avvierà e vedrai scorrere informazioni nella finestra come sotto.
NON USCIRE dalla pagina né cliccare niente fino a quando è finito. Potrebbe volerci più di 10 minuti.

Receive code from GitHub



Build dev 80190059



NODE_VERSION=15.2

```
-----> Installing binaries
  engines.node (package.json): ^10.15.2 || ^8.15.1...
  engines.npm (package.json): ^6.4.1

  Resolving node version ^10.15.2 || ^8.15.1...
  Downloading and installing node 10.22.0...
  Bootstrapping npm ^6.4.1 (replacing 6.14.6)...
```

Autoscroll with output

[View build log](#)

Aspetta la fine del deploy. Se interrompi prima, avrai un sito che non funziona.
Clicca View

Receive code from GitHub



Build dev 80190059



Release phase



Deploy to Heroku



Your app was successfully deployed.

View



Tuo sito dovrebbe aprirsi all'ultima versione.

About

nightscout
version 14.0.0
head

Se qualcosa è andato storto, puoi ripetere questi passi quante volte vuoi.

Contatti



[Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)



glicemiadistanza@gmail.com