

Abbonamento a un sito Nightscout gestito

Nightscout Pro



Nightscout Pro è stato ideato all'annuncio di Heroku di abbandonare il piano gratuito, un momento in cui molti si sono improvvisamente resi conto che avere un'istanza di Nightscout affidabile è incredibilmente importante e che non si può continuare a saltare da una piattaforma all'altra.

Nightscout Pro è stato creato da **Andy Low**, uno sviluppatore Web diabetico di tipo 1 nel dicembre del 2022.

"È un enorme ringraziamento alla comunità per aver creato e distribuito una tecnologia così incredibile e che cambia la vita. Sono così felice di poter restituire qualcosa e facilitare la diffusione della parola di Nightscout e di tutte le altre soluzioni per il diabete fai-da-te associate disponibili".

Nightscout Pro offre un sito assistito, facile da creare, senza manutenzione, con aggiornamenti automatici e anche di più.

L'abbonamento parte da 4€ per un mese a 40€ per anno.

Monthly	Quarterly	Bi-Annually	Annually
€ 4 per month	€ 12 per quarter	€ 20 every 6 months	€ 40 per year


The image shows four pricing options for Nightscout Pro: Monthly (€4 per month), Quarterly (€12 per quarter), Bi-Annually (€20 every 6 months), and Annually (€40 per year). To the right of the pricing table are logos for VISA, Mastercard, AMEX, and a circular logo with a stylized 'i'.

Per maggiori informazioni su Nightscout vedi qua:
<https://nightscout-github-io.translate.google/? x tr sl=auto& x tr tl=it>

1 – Creare un account

Vai sul sito <https://nightscout.pro/>

Clicca **START MY CLOUD**

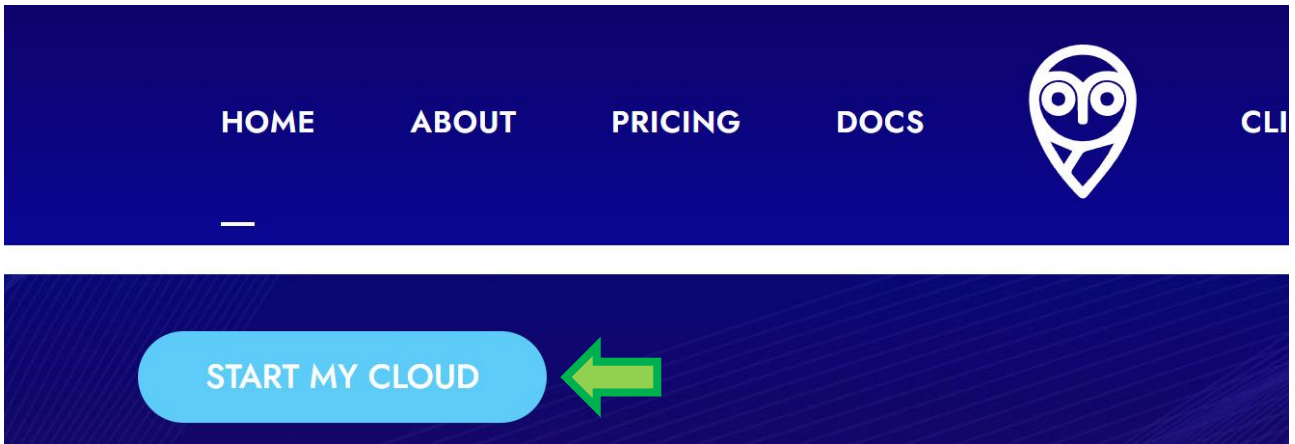

Compila con tuo indirizzo email (non mail usa e getta) e crea una password, quindi **Sign Up**.


The image shows the sign-up form on the Nightscout Pro website. The form is on a black background and includes the following elements:

- Nightscout Pro logo and tagline: "Your CGM in the cloud, FOREVER!"
- "Email Address" label and a text input field.
- "Password" label and a text input field.
- A list of password requirements:
 - must be 12 or more characters long.
 - must contain at least 1 lower case letter.
 - must contain at least 1 upper case letter.
 - must contain at least 1 number.
 - must contain at least 1 special character.
- "Confirm Password" label and a text input field.
- "Passwords Match" text below the confirm password field.
- A light blue "Sign Up" button.

A green arrow points to the right of the "Sign Up" button.

Da adesso puoi usare queste credenziali per entrare nel sito in <https://my.nightscoutpro.com/>.


Crea il tuo sito con **CREATE A NEW NIGHTSCOUT SITE**.

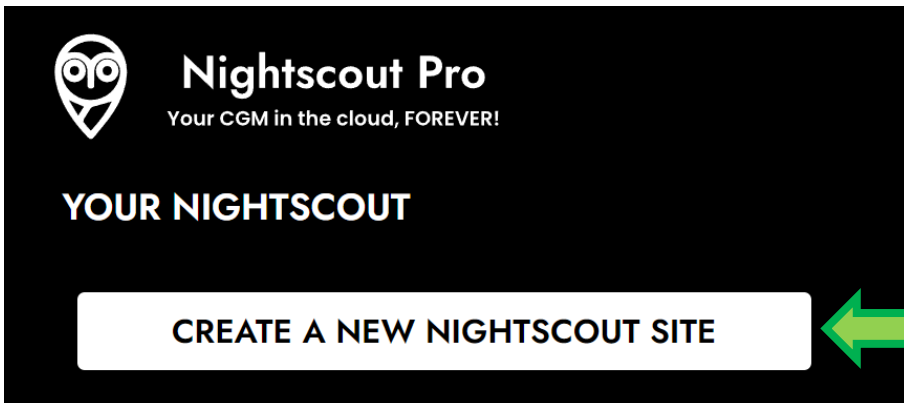


Scegli il tipo di abbonamento che vuoi.

Puoi fare una prova e non sei sicuro che fa per te, prendi mensile. Hai un mese per valutare, se ti convince scrivi a Nightscout Pro e cambia al piano annuale/semestrale per risparmiare. Meglio che prendere per un anno e ripensarci dopo un mese.

Scegli **SUBSCRIBE** per quello che hai scelto.

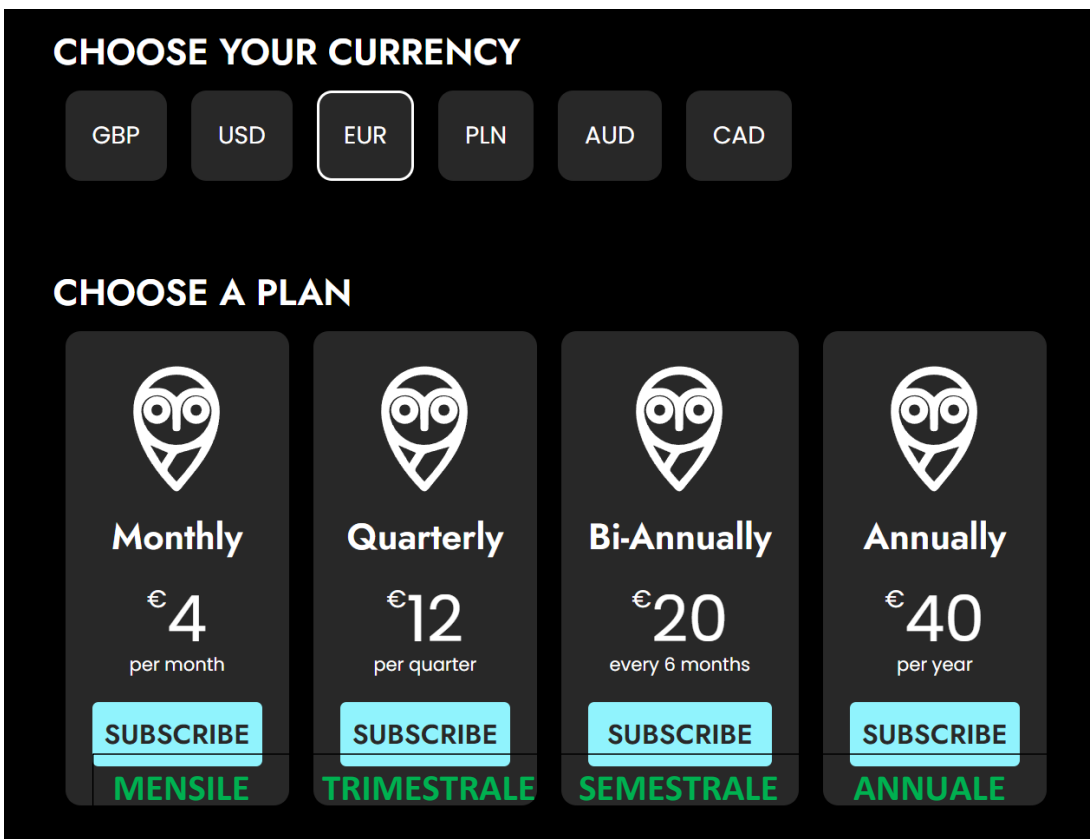

Devi avere una carta di credito per pagare.

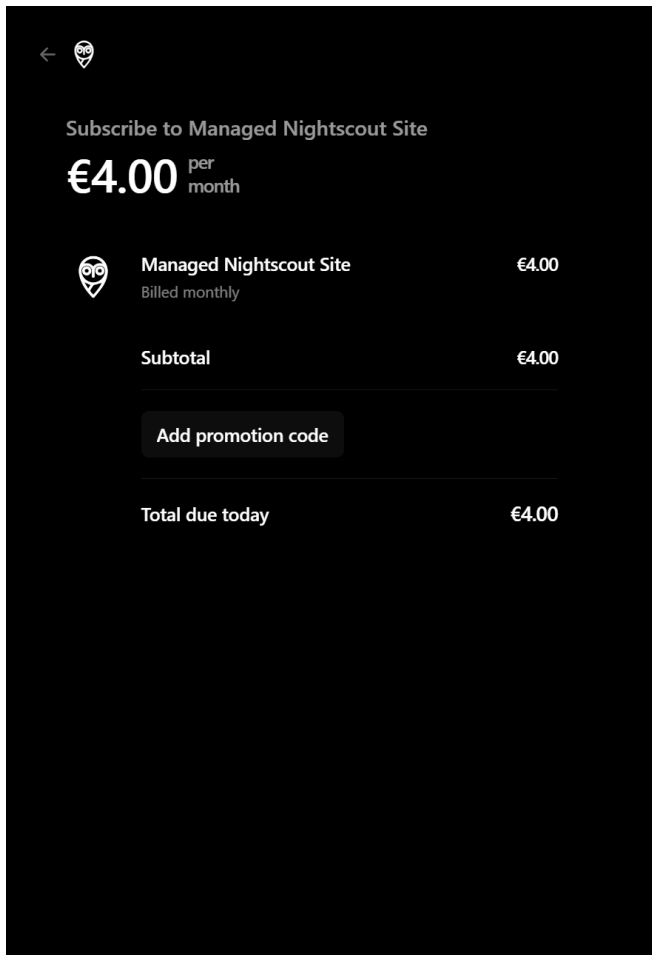

Contact information

Email

Payment method

Card

SOFORT

Card information

1234 1234 1234 1234

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS DISCOVER

MM / YY

CVC

Name on card

Billing address

Italy


Address

Enter address manually.

Securely save my information for 1-click checkout
Pay faster on Nightscout Pro Ltd and everywhere Link is accepted.

Subscribe

Adesso puoi creare il tuo sito, è semplice. Prima scegli un nome:
(solo caratteri in minuscolo, numeri e un trattino – se vuoi).

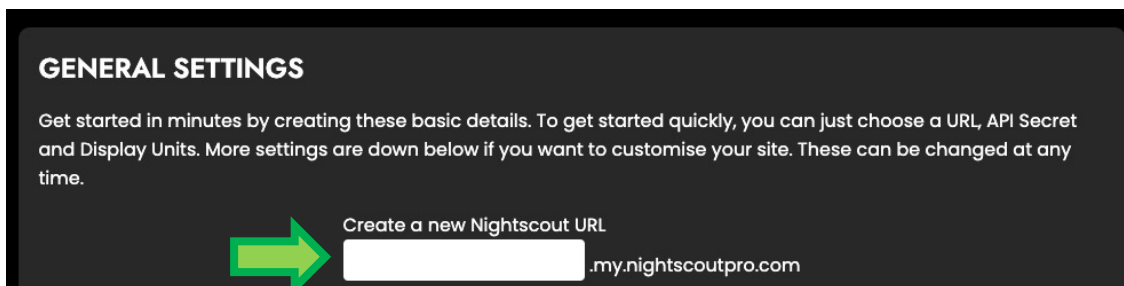

Se il nome è già utilizzato vedrai questo: **This URL is unavailable.** scegline un altro.

Se invece non è un nome autorizzato: **Subdomain cannot start with a number.** **Illegal Characters Detected.**

Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

Scegli la password del tuo sito Nightscout (API_SECRET) deve essere lunga minimo 12 caratteri, ed è consigliato di non usare caratteri speciali (no % & @ ” \ / ...se voi puoi mettere ! - _), meglio solo lettere (maiuscole e minuscole) e numeri. No spazio.

Seleziona le unità e quindi **CREATE NIGHTSCOUT**.

Create API Secret (Password) [Min. 12 Characters]

Display Units mg/dl mmol/L

CREATE NIGHTSCOUT

Ecco fatto, hai creato il tuo sito Nightscout.

Nightscout Pro
Your CGM in the cloud, FOREVER!

HOME MANAGE BILLING LOGOUT

YOUR NIGHTSCOUT

glicemiadistanza.my.nightscoutpro.com

Visit Site

Config Vars Online

Puoi configurare le variabili in **Config Vars**. Hai accesso a tutto, di modo semplice. Sono elencate per categoria di limiti a Loop.

More Settings (optional)

TARGETS (+)

DEXCOM BRIDGE (+)

PLUGINS (+)

ALARMS (+)

FORECAST (+)

PENDING (+)

Se usi Dexcom Share devi inserire le tue credenziali in **Dexcom Bridge**.
Lascia gli altri campi vuoti.
Ricordati che devi aver un follower attivo per vedere dati in Nightscout.

DEXCOM BRIDGE

BRIDGE_USER_NAME
[input field]

BRIDGE_PASSWORD
[input field]

BRIDGE_MAX_FAILURES
[input field]

BRIDGE_INTERVAL
[input field]

BRIDGE_SERVER US Non-US

Per aprire il tuo nuovo sito Nightscout, seleziona **Visit Site**.

YOUR NIGHTSCOUT

glicemiadistanza.my.nightscoutpro.com

[Visit Site](#)

Una volta il tuo sito Nightscout aperto, clicca sul menu and seleziona **Profile Editor**.

Nightscout

7:56


Reports

Profile Editor

Admin Tools


Clock Views: Clock Color Simple

Imposta il fuso orario Time zone ed altri campi se vuoi.

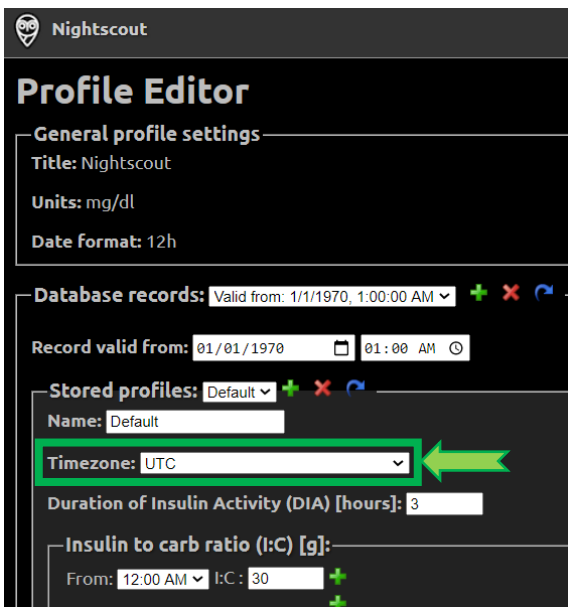


Italia: Europe/Rome

Vai in fondo a Authentication status e clicca **Authenticate**. Digita la API secret. Clicca **Update**.
Clicca **Save**.

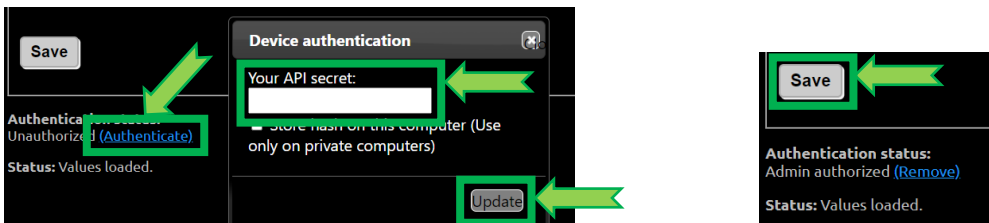


Se la scritta sotto compare clicca OK, verifica lo stato in alto a destra.

mynewcgm.herokuapp.com says
Profile is going to be saved in newer format used in Nightscout 0.9.0
and above and will not be usable in older versions anymore.
Are you sure?

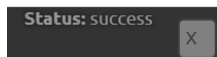

Se usi Dexcom Share dovresti vedere dati entro qualche minuto, per xDrip+, Spike, xDrip4iOS, etc.
devi impostare l'indirizzo Nightscout e l'API secret nell'app.

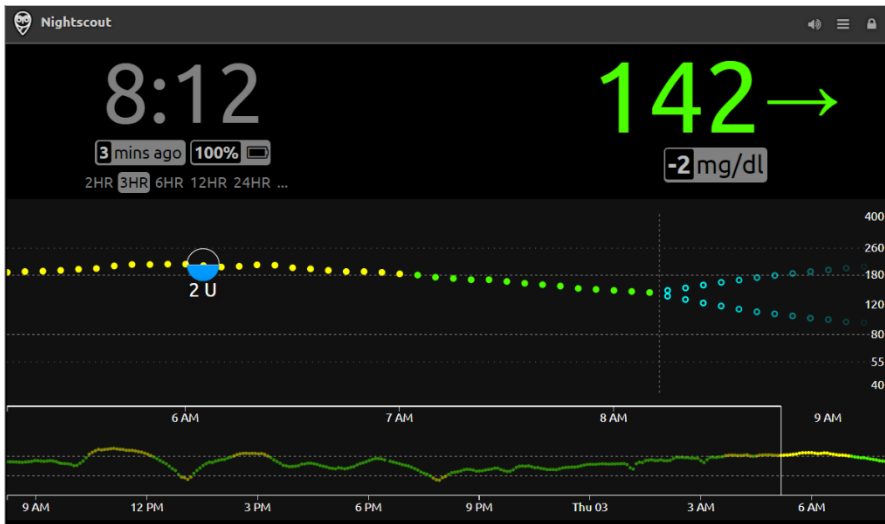

Benvenuto in CGM in the cloud, la glicemia nel cloud!

Contatti



[Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie](#)



glicemiadistanza@gmail.com